


— Soft laser expertise

# premio 30

Laser duo

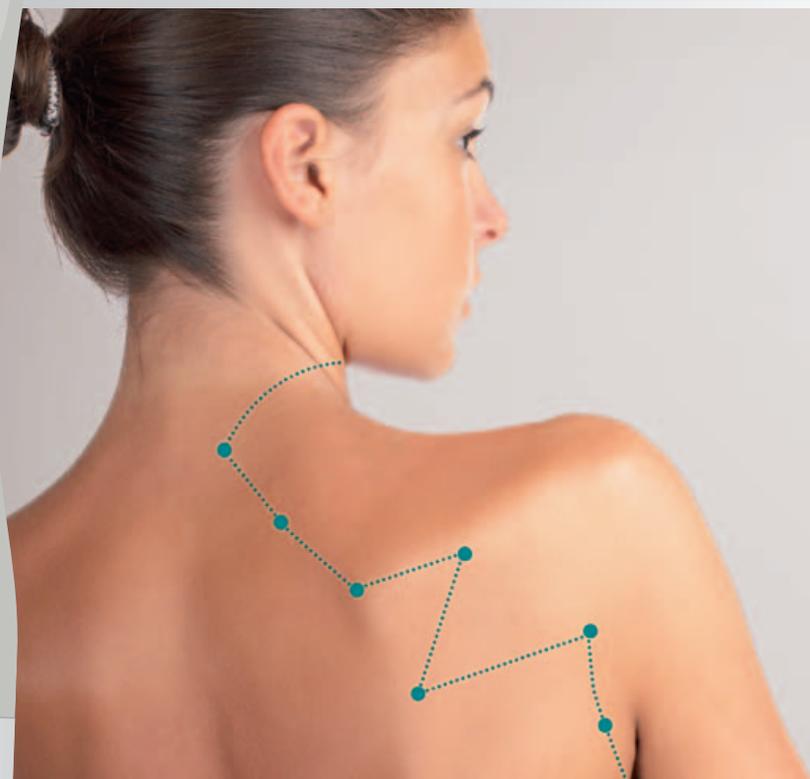

Akupunktur  
Aurikulotherapie  
Suchtbehandlung  
Reflexzonen-therapie

Sedatelec

# premio 30

Laser duo

Schmerzfreie Stimulation von Körper- und Ohrpunkten



**4 Behandlungsmodi**



**2 Leistungsstärken für**

oberflächliche Punkte  
tief liegende Punkte



**Mehr als 10 Stunden  
autonomer Betrieb.**

Aufladbare  
Batterie

# Zwischen Tradition und Modernität: **sicher und effizient**

## Akupunktur

### Tonisierung

Kontrollierte und schnelle  
Tonisierung der  
Akupunkturpunkte.



### Dispergierung

Innerhalb weniger Sekunden  
erfolgt eine **Dispergierung des Qi**  
und die Energiestase wird  
zum Fließen gebracht.



### Harmonisierung

Bei dieser Behandlung  
werden **der Punkt und der Fluss  
im Meridian** durch abwechselnde  
Pulstakte ausgeglichen.



## Aurikulotherapie

### Frequenzstimulation

Dieser Modus gewährleistet die Stimulation  
der "pathologischen" Punkte bei der  
**Aurikulotherapie** (Schmerzen, psychische  
oder funktionelle Störungen, Sucht, ...).




# Frequenzeffizienz und -innovation

## Eine neue Dynamik der Impulsstrahlung

### Wobbelung (100-10 000Hz)


#### Exponentielle Beschleunigung

Die Tonisierung ist das Ergebnis einer **Rhythmusbeschleunigung der Impulsstrahlung**, die eine dynamisierende Wirkung hat.

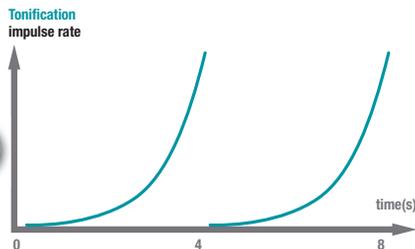


#### Exponentielle Verlangsamung

Die Dispergierung wird durch eine **Rhythmusverlangsamung der Impulsstrahlung** erreicht.

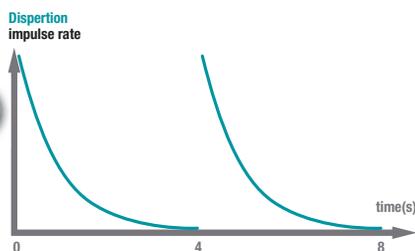

#### Abwechselnde Beschleunigung und Verlangsamung

Durch eine **abwechselnde Rhythmusbeschleunigung und -verlangsamung** der Strahlung wird die Harmonisierung des Punktes erreicht.

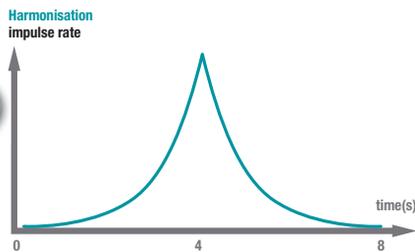

## Durchlauf

### 7 Frequenzen nach Nogier

Die Information ist bei diesem Aurikulotherapieprogramm in der Frequenz enthalten.





Es ermöglicht die aufeinander folgende Emission per **Durchlauf aller Nogier-Frequenzen** (Frequenzen A, B, C, D, E, F und G).

# Der anerkannte Spezialist für **gepulste Laser**

## Wellenlänge

Die **Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge von 905 nm** durchdringt die Haut und erreicht die in tieferen Schichten gelegenen Zellen, ohne von Wasser, Hämoglobin oder Melanin absorbiert zu werden.

## Spitzenwert

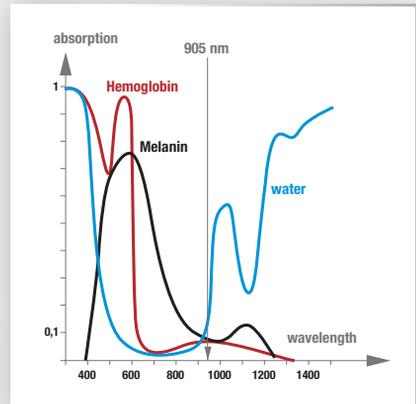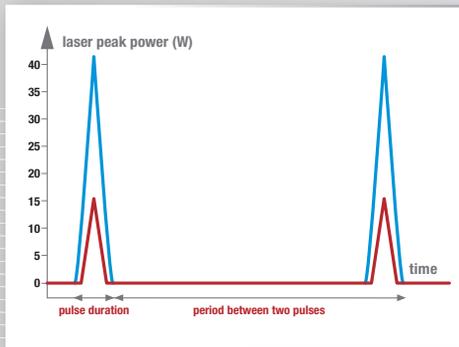

Die Laserstrahlung erfolgt in Form von kurzen Impulsen mit hoher Spitzenleistung. Dieser Emissionsmodus bewirkt, dass der Laserstrahl die **erforderliche Leistung hat, um das Gewebe zu durchdringen** und dabei gleichzeitig zu schonen, so dass die relevante Information ohne zerstörenden Thermoefekt an den Punkt gelangt.

## Regulierbare Leistung

Die Leistung 15 oder 40 Watt kann entsprechend der gewünschten Tiefe eingestellt werden.

- **Oberflächliche Punkte:** Punkte an der Hautoberfläche (Gesicht, Ohren...)
- **Tiefliegende Punkte:** sonstige Körperpunkte

## Behandlungsdauer

Kurze Behandlungsdauer **zwischen 30 Sekunden** je Punkt. Dank dieser kurzen Anwendungsdauer wird dem Punkt die optimale Energiemenge zugeführt und zugleich die Reaktionszeit des Körpers berücksichtigt.

Der **+** Sedatelec:

**Die Wobelfrequenz für Akupunktur Anwendungen**

Das Sedatelec Markenzeichen: **Die Nogier-Frequenzen für die Anwendung in der Aurikulothérapie**



# premio 30

Laser duo



**Effizient, leicht  
und ergonomisch**

**Drahtloser Laser,**  
ideal für die Praxis  
und unterwegs



*Laserstrahlen sind nicht sichtbar. Laserstrahl nicht auf die Augen richten. Klassifizierung 3B nach IEC60825-1  
Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.*

Fordern Sie noch heute die Broschüre „Weitere Informationen“ für den Premio 30  
bei Ihrem Händler an oder schreiben Sie an [sedatelec@sedatelec.com](mailto:sedatelec@sedatelec.com)

Ihr Händler



Hergestellt in Frankreich

**Sedatelec** • Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 322  
Fax + 33 (0) 478 508 903 • [sedatelec@sedatelec.com](mailto:sedatelec@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

