


CMD

CMD			
Areale	Wellenlänge	Energie/Punkt	Behandlungen
Kiefergelenk	IR	2-3 J	
Tender Points/Muskel- punkte (lokal und peripher)	IR	6 J/Punkt evtl. bis zu 9 J	
Trismus	IR	6-10 J	
Arthritis/Arthrose/Condylitis	IR	2 J	
Lymphwege	IR	2-4 J	

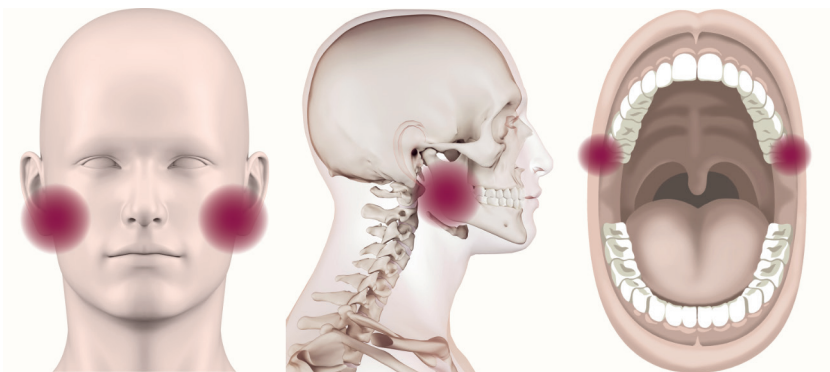

Technik

- Das Gelenk wird im Kontakt-Modus von außen bestrahlt (Punktlaser: 2-3 Punkte oder Flächenlaser über das Gelenk)
- Der M. pterygoideus wird ebenso von innen im Kontaktmodus mit 6 J/ Punkt bestrahlt (Punktlaser mit Oralapplikator)
- Dazu werden die Tender Points/die empfindlichen Muskelpunkte (Abtasten der Kaude der Halsmuskulatur) mit 6 J/Punkt behandelt.

Hinweise

Bei Trismus werden die höchsten Energien eingesetzt. Der Erfolg ist meist unmittelbar nach der Behandlung sichtbar, der Mund kann wieder weiter geöffnet werden.